


# ТРАВУШКА™

ТОВАРЫ ДЛЯ УЮТНОГО ДОМА

## Хорошие ортопедические матрасы

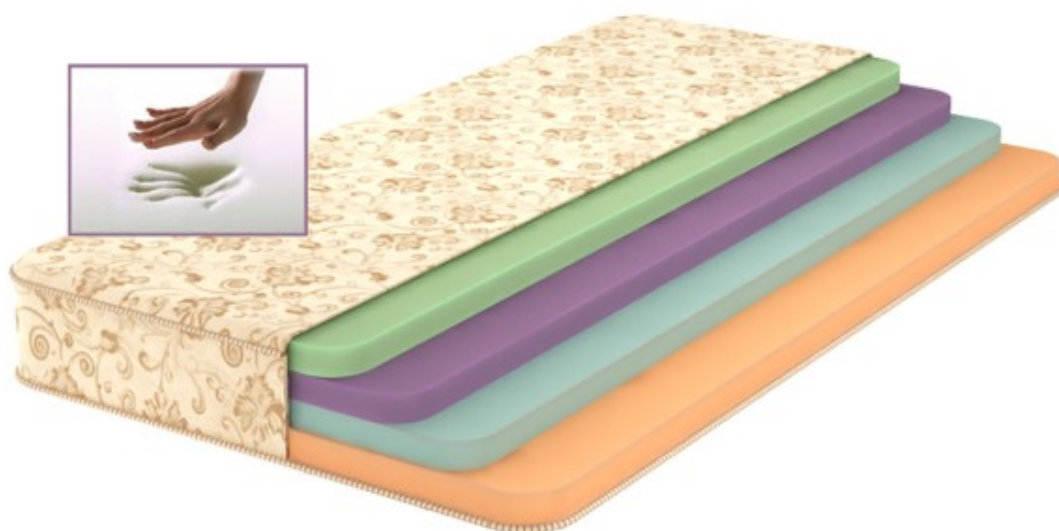

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

Артикул \_\_\_\_\_

Размер \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_



Транспортировка, погрузка и разгрузка, хранение и эксплуатация предполагает горизонтальное или вертикальное положение изделия. Складывать, скручивать, сгибать категорически запрещено.



Для продления срока полезного использования производитель рекомендует менять положения матраса "голова - ноги", а если матрас имеет две рабочие поверхности, то периодически менять эксплуатируемые поверхности на противоположные.



Матрас отгружается покупателю в упакованном виде. Упаковка полиэтилен герметична и предохраняет изделия от влаги, пыли и прочих загрязнений.

При приемке убедитесь в целостности упаковки, наличии товарного вида изделия, соответствие заявке покупателя, наличие дефектов которые можно обнаружить при визуальном осмотре.



Матрасы не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью. Попадание влаги на матрас не допускается, за исключением случаев когда матрас оснащен специальным влагозащитным чехлом торговой марки Травушка. Допускается сухая чистка с использованием мыльных растворов или средств для чистки мягкой мебели. Сушка с помощью утюга запрещена.



После распаковки матраса, до начала его эксплуатации, обязательно выдержать изделие в хорошо проветриваемом помещении. Минимальный срок проветривания не менее пяти дней.



Строго соблюдайте допустимую нагрузку на одно спальное место.



Матрас должен эксплуатироваться на ровном основании, с отсутствием выступающих на поверхности основания элементов, способных нарушить целостность чехла изделия, или способствующих возникновению иных повреждений в результате непредусмотренных эксплуатационных деформаций.



Для продления срока службы матраса рекомендуем использовать защитные тонкие матрасы и наматрасники торговой марки Травушка.



Срок полезного использования при соблюдении всех эксплуатационных правил и рекомендаций производителя составляет не менее 5 (пяти) лет.



# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТРАВУШКА™

## **Гарантия на матрасы торговой марки Травушка - 18 месяцев.**

Настоящая гарантия действительна в случае сохранения вшитой в чехол матраса этикетки производителя и отсутствия следов механических повреждений или следов вскрытия матраса. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, вызванные естественным износом материалов.

По вопросам, связанным с эксплуатацией матрасов и претензиями к качеству, просим направлять свои обращения через раздел нашего сайта: "Приемка, возврат и обмен" <http://caskad.spb.ru/vozvrat-i-obmen>

## **Надлежащее качество**

Обмен и возврат товара надлежащего качества после его получения покупателем возможны в течение 7 дней, если товар приобретался через интернет-магазин. При этом возврат или обмен возможны только в случае наличия целостной упаковки и сохранения товарного вида изделия и его потребительских свойств.

## **Надлежащее качество по индивидуальному заказу**


Если изделие выполнено не в соответствии со стандартной моделью и/или не по стандартной сетке размеров, то такие изделия не подлежат обмену или возврату в случае, если инициируется возврат (обмен) товара надлежащего качества.

## **Ненадлежащее качество**

В течение всего гарантийного срока производитель гарантирует сохранение потребительских свойств товара. Претензии на ненадлежащее качество принимаются в соответствии с формой претензии, направленной в наш адрес по электронной почте: [arevik\\_vk@inbox.ru](mailto:arevik_vk@inbox.ru)



Общий срок службы изделий зависит от условий эксплуатации и рекомендуемой нагрузки для каждой модели. Размер изделия может варьироваться на величину +/- 15 мм, в соответствии с ГОСТ 14314-94, ГОСТ 19917-93.

<b>Состав изделия:</b>	
Чехол съемный	Чехол съемный на молнии из мембранной ткани «Медэластик». Ткань "Медэластик": трикотажное полотно из полиэфирных нитей, 100% полиамид, с микропористым полиуретановым покрытием, 100% полиуретан.
Чехол несъемный	Хлопковый или синтетический жаккард стеганный на шерстикроне содержащий не менее 40% натуральной овечьей шерсти
Наполнитель	Наполнитель эластичный пенополиуретан плотностью от 25 до 55 кг/м3 с допустимой нагрузкой на одно спальное место не менее 90 кг. в зависимости от модели матраса.  Пружинный блок "Боннель" или блок независимых пружин. Пружинные блоки изолированы термоволоком плотностью не менее 450 г/м2.  Кокосовое волокно скрепленное полиэфирными волокнами
Плотность материалов:	
Материал съемного чехла:	Общая: не менее 190 г/м2;  Основа: полиамид 100% (вес 90 г/м2);  Покрытие: полиуретан 100% (вес 100 г/м2).
Материал съемного чехла	Хлопковый или синтетический жаккард плотностью не менее 280 г/м2
Материал наполнителя:	Эластичный пенополиуретан плотностью 25 кг/м3- 55 кг/м3, блок независимых пружин не менее 250 пружин на м2, кокосовое волокно плотностью не менее 1200 г/м2
Паропроницаемость:	580 г/м2 за 24 часа при 38С, (DIN 53122)
Влагонепроницаемость:	Выдерживает давление водяного столба высотой 300 см (ISO 1420)
Максимальное усилие растяжения материала:	630 Н / 5см по (DIN EN ISO 527-3)
Ударная нагрузка:	160 Н / 5см (ISO 5081)
Назначение:	Предназначен для использования в бытовых помещениях, в медицинских и социальных учреждениях, в особенности на кроватях, где пациенты ограничены в подвижности, обеспечивая антипролежневый эффект за счет высокой паропроницаемости материала. Поверхность матраса является барьерной по отношению к бактериям, вирусам, биологическим загрязнениям, медицинским растворам.
Эксплуатационные характеристики:	Стирка в стиральной машине с температурой до 95С, машинная сушка до 120С, автоклавирование или сухожаровая обработка до 110С. Обработка любыми не хлор содержащими дезинфицирующими растворами.   (стандарты обработки по ISO 6330)

**Благодарим Вас, за то, что Вы выбрали нашу продукцию!**

Ортопедические матрасы Травушка ТМ предназначены для сна и отдыха, сертифицированы надлежащим образом, соответствуют ГОСТ 19917-93.

Декларация о соответствии РОСС RU.AB75.Д04640.

Наши матрасы являются изделиями медицинского назначения и одобрены РОСЗДРАВНВДЗОРОМ.

Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1662 от 05.06.2014 года. Противопоказания отсутствуют.